

SYNCA

MANUAL DEL USUARIO

CirC

Sillón de Masaje Compacto

MR320



Lea con detenimiento este MANUAL DEL USUARIO antes de usar el producto.

Gracias por adquirir este producto. Antes de utilizarlo, por favor lea este MANUAL DEL USUARIO en su totalidad y ponga especial atención a las precauciones de seguridad para asegurarse de usar el producto de manera apropiada.

Por favor conserve su MANUAL DE USUARIO como referencia para el futuro.

CONTENIDO

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.....	1
NOMBRE Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES.....	4
Estructura externa.....	4
Estructura interna.....	4
Control remoto.....	5
Cómo utilizar el control remoto.....	6
Instalación.....	9
Lugar de la instalación.....	9
Protección para el piso.....	9
Ubicación del sillón.....	9
Cómo instalar el sillón.....	9
Cómo mover el sillón.....	10
Encender la alimentación.....	10
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO.....	11
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	12
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	13

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea el documento de instrucciones completo antes de utilizar este producto.

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- 1) Desconecte siempre el equipo inmediatamente después de cada uso y antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, fuego, descarga eléctrica o lesiones personales:





1. Nunca deje sin vigilar un aparato eléctrico cuando está conectado. Desconéctelo de la toma cuando no esté en uso y antes de colocarlo o quitarle partes.
2. No opere el equipo debajo de una manta o sobre una almohada. Esto puede generar calor excesivo y fuego, descargas eléctricas o lesiones personales.
3. Es necesario supervisar con atención cuando el aparato es utilizado por niños o personas discapacitadas o cerca de ambos.
4. Utilice este equipo solamente como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
5. Nunca utilice el sillón si tiene algún cable o clavija dañado, si no funciona correctamente o si sufrió algún golpe, daño, o cayó al agua. Contacte con un centro de servicio para su revisión y reparación.
6. No transporte este aparato tirando del cable de alimentación ni use el cable como asa.
7. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
8. Nunca ponga en funcionamiento el equipo con las aberturas de ventilación bloqueadas. Mantenga la ventilación libre de pelusas, cabellos y otras obstrucciones.
9. Nunca deje caer o introduzca objetos en ninguna abertura.
10. No utilice el aparato al aire libre.
11. No lo utilice cuando se estén utilizando aerosoles (spray) o donde se esté suministrando oxígeno.
12. Para desconectarlo, coloque el interruptor en la posición de apagado y después desconecte la clavija de la toma de corriente.




CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Precauciones de seguridad

- Antes de utilizar el producto, por favor lea estas PRECAUCIONES DE SEGURIDAD cuidadosamente para asegurarse de que está utilizando el producto de manera adecuada.
- Estas PRECAUCIONES DE SEGURIDAD son muy útiles para asegurar el uso correcto del sillón de masaje.




	ADVERTENCIA: El uso inadecuado puede causar daño al producto.
	PRECAUCIÓN: El uso inadecuado puede resultar en lesiones personales.
	Prohibido. Los círculos cruzados indican acciones prohibidas. (p.ej., el dibujo de la izquierda significa que no está permitido desensamblar el sillón)
	Obligatorio. Los círculos oscuros indican acciones obligatorias. (p.ej., el dibujo a la izquierda indica que es preciso desconectar la clavija).

	Toda persona con las siguientes condiciones debe consultar a un médico antes de utilizar el sillón. <ol style="list-style-type: none"> 1. Personas que utilicen instrumentos médicos electrónicos dentro del cuerpo, por ejemplo marcapasos. 2. Personas que estén bajo tratamiento con un médico, especialmente cuando la persona se siente mal o incómoda. 3. Personas que padezcan tumores malignos, enfermedades del corazón u otras condiciones médicas graves.
	<ul style="list-style-type: none"> • No permita que las personas con discapacidades mentales utilicen el sillón sin estar supervisados. • No permita que los niños jueguen sobre el sillón de masaje o lo utilicen. • No permita que más de una persona utilice el sillón de masaje al mismo tiempo. • Si el cable de corriente o la clavija sufren cualquier tipo de daño, desconecte el sillón inmediatamente de la toma de corriente y consulte a un proveedor de servicio autorizado para que lo repare o reemplace.
	Nadie excepto el personal de mantenimiento indicado por la empresa debe desmontar, dar mantenimiento o remodelar este sillón de masaje. Si existen problemas, por favor contacte a su distribuidor local de inmediato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD




PRECAUCIÓN


	<ul style="list-style-type: none"> • No utilice el sillón de masaje de manera continua durante más de 20 minutos ni aplique masaje a una sola parte del cuerpo por más de 5 minutos. • Coloque el sillón de masaje sobre una superficie plana. • Cuando desconecte el enchufe, por favor agarre la cabeza de la clavija, no tire del cable. • No conecte la clavija en una toma de corriente que no sea del voltaje especificado: esto puede provocar fuego o daños al sillón de masaje. • Antes de utilizar el equipo, verifique detrás del cojín del respaldo para comprobar que la tela del respaldo no esté dañada; si hay daños, por favor no utilice el sillón de masaje hasta contactar a su distribuidor local para que lo repare. • No utilice el control remoto con las manos húmedas ni coloque objetos pesados sobre él. • Este sillón está diseñado para personas de 90 Kg de peso o más ligeras. • No utilice otros equipos terapéuticos junto con este sillón de masaje.
	<ul style="list-style-type: none"> • Para evitar malestar físico, nunca utilice el sillón de masaje inmediatamente después de las comidas. • No se duerma en el sillón de masaje cuando esté funcionando. • No utilice el sillón de masaje cuando esté intoxicado o se sienta indispuerto. • Si el tapiz se ensucia, utilice un limpiador de cuero de buena calidad, no utilice limpiadores químicos, petróleo o detergentes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte el sillón antes de darle mantenimiento. Para evitar una descarga eléctrica, nunca conecte o desconecte la clavija de la toma de corriente con las manos húmedas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Cuando no esté en uso, siempre apague el sillón de masaje y desconéctelo de la toma de corriente.

NOMBRE Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES

Estructura interna

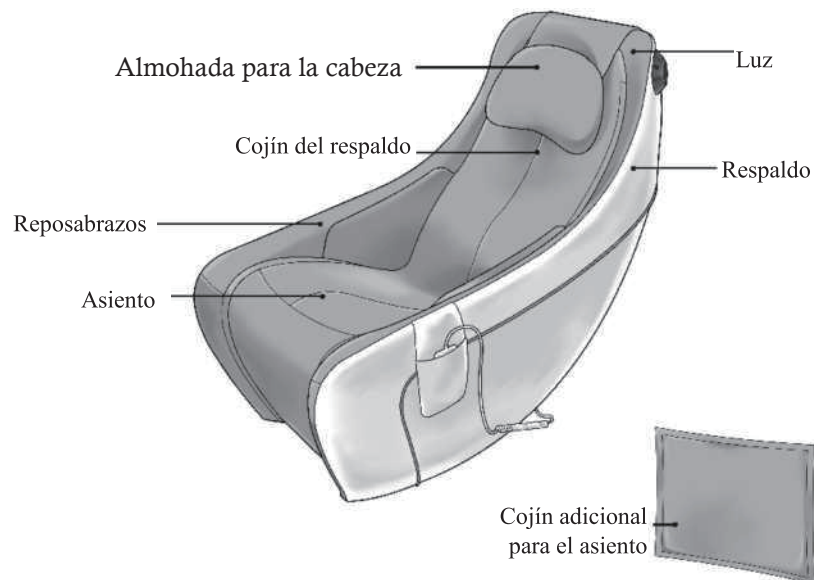


Estructura externa

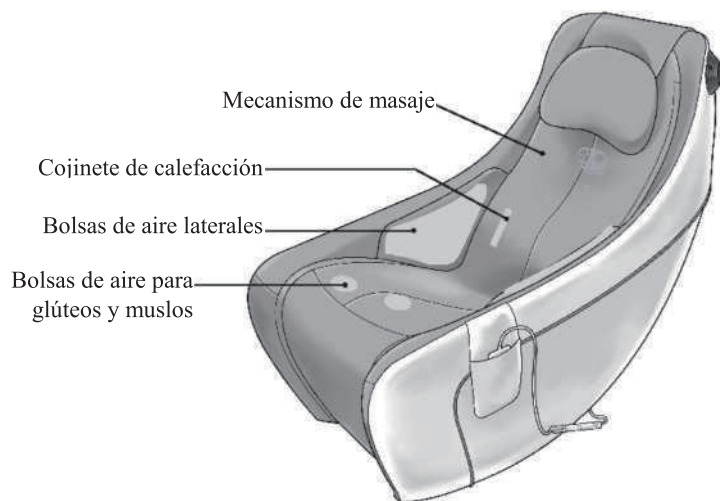





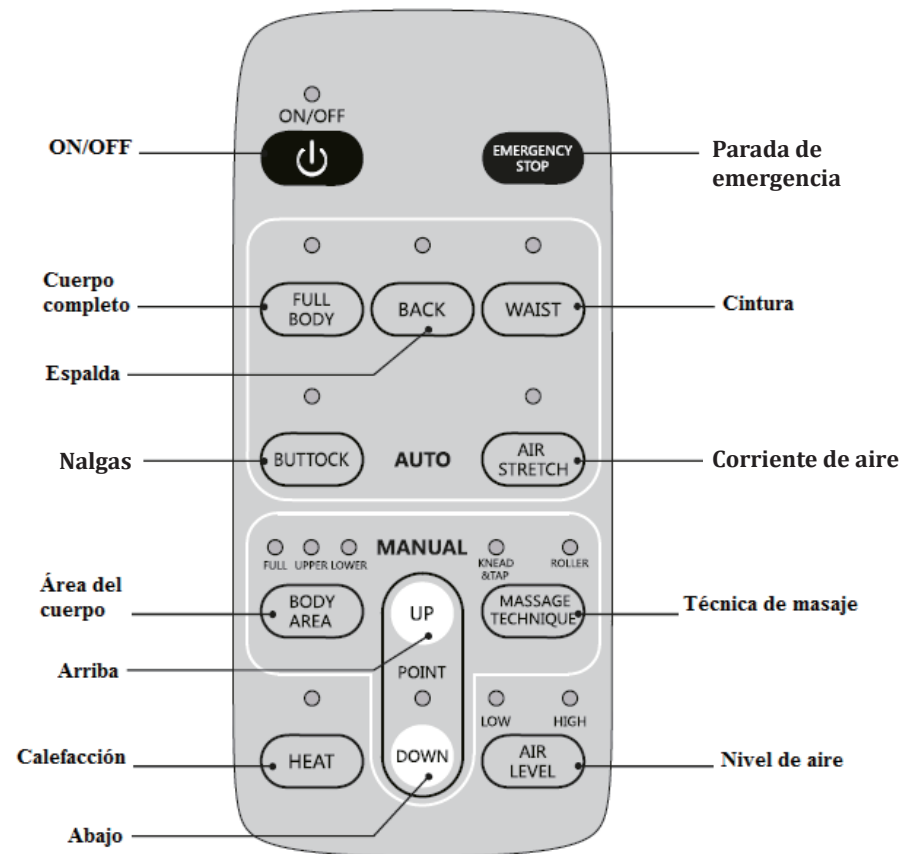


NOMBRE Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES

Control remoto






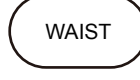

NOMBRE Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES

Cómo utilizar el control remoto

	<p>ON/OFF (encendido/apagado)</p> <p>Con el sillón recibiendo corriente, presione el botón ON/OFF para encenderlo: se encenderá una luz para indicarle que está encendido. Elija cualquier programa, ya sea automático o manual, para comenzar el masaje. Presione el botón nuevamente para detener el masaje (el tiempo normal es de 15 minutos). Si no elije algún programa en menos de 30 segundos después de presionar el botón de encendido, el sillón se apaga automáticamente.</p>
	<p>Parada de emergencia</p> <p>En cualquier momento, presione el botón "EMERGENCY STOP" para detener cualquier función. Presione el botón de encendido para reiniciar el masaje.</p>
	<p>Cuerpo completo</p> <p>Cuando esté encendido el sillón, presione el botón "FULL BODY" para iniciar automáticamente un programa de masaje de cuerpo completo.</p>
	<p>Espalda</p> <p>Cuando esté encendido el sillón, presione el botón "BACK" para iniciar automáticamente un programa de masaje para su espalda.</p>
	<p>Cintura</p> <p>Cuando esté encendido el sillón, presione el botón "WAIST" para iniciar automáticamente un programa de masaje para su cintura.</p>
	<p>Nalgas</p> <p>Cuando esté encendido el sillón, presione el botón "BUTTOCK" para iniciar automáticamente un programa de masaje para sus glúteos y muslos.</p>
	<p>Corriente de aire</p> <p>Cuando esté encendido el sillón, presione el botón "AIR STRETCH" para iniciar automáticamente un programa de masaje con presión de aire.</p>

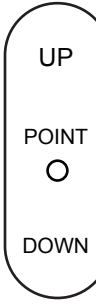NOMBRE Y FUNCIÓN DE LOS COMPONENTES

	<p>Área del cuerpo</p> <p>Durante el modo de masaje automático, presione el botón "BODYAREA" para cambiar al modo de masaje manual y cambiar las posiciones de masaje por ejemplo a FULL u UPPER.</p> <p>Durante el modo de masaje manual, presione "BODY AREA" para cambiar la posición de masaje entre FULL, UPPER (superior) y LOWER (inferior).</p>
	<p>Técnica de masaje</p> <p>Durante el modo de masaje automático, presione el botón "MESSAGE TECHNIQUE" para cambiar al modo de masaje manual y cambiar las técnicas de masaje entre "KNEAD & TAP" (golpetear y sobar) y "ROLLER" (rodillo).</p>
	<p>Arriba</p> <p>En cualquier modo masaje, presione el botón "UP" para cambiar al modo de masaje POINT (punto); mantenga presionado el botón para mover el mecanismo hacia arriba. Solamente se realiza el masaje "KNEAD & TAP" en el modo POINT.</p> <p>Abajo</p> <p>En cualquier modo de masaje, presione el botón "DOWN" para cambiar al modo de masaje POINT; mantenga presionado el botón para mover el mecanismo hacia abajo. El masaje "KNEAD & TAP" está disponible solamente en el modo POINT.</p>
	<p>Calefacción</p> <p>En cualquier modo de masaje, presione el botón "HEAT" para activar o desactivar la función de calefacción.</p>
	<p>Nivel de aire</p> <p>Durante cualquier modo de masaje excepto "AIR STRETCH", presione el botón "AIR LEVEL" para cambiar entre "LOW" (bajo) y "HIGH" (alto) y para activar y desactivar la función de presión de aire,</p> <p>Durante el modo de masaje "AIR STRETCH", presione el botón "AIR LEVEL" para ajustar el nivel.</p>


INSTALACIÓN

Sitio de la instalación

Asegúrese de que haya una distancia segura detrás y delante del sillón de masaje.


- Detrás: mínimo 10 cm desde la pared o cualquier otro obstáculo.
- Delante: mínimo 20 cm desde la pared o cualquier otro obstáculo.

Para evitar interferencia de señal, coloque el sillón al menos a 1 metro de distancia de televisiones, radios u otros dispositivos de audio o video.

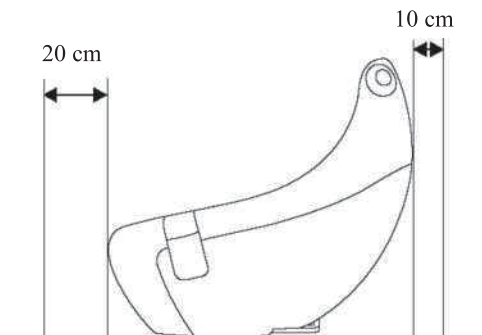



Protección para el suelo

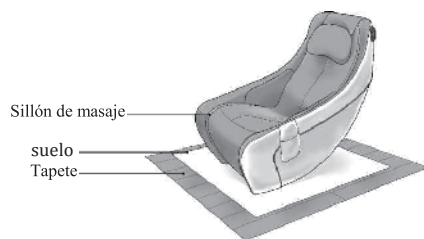Coloque una alfombra o un tapete debajo del sillón de masaje para asegurarse de que la superficie esté nivelada.



Ubicación del sillón

	Mantenga el sillón de masaje lejos de lugares húmedos (por ejemplo el baño) para evitar descargas eléctricas.
	Mantenga el sillón de masaje lejos de fuentes de calor (por ejemplo la estufa) para evitar daños al material de cuero sintético.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Métodos de instalación

(Le recomendamos no mover el sillón usted mismo, pida apoyo para hacerlo).


Paso 1: soporte de apoyo

- Retire el cartón y con cuidado saque el sillón y los accesorios.
- Gire el soporte de apoyo hacia atrás (el soporte de apoyo se encuentra debajo del sillón de masaje).

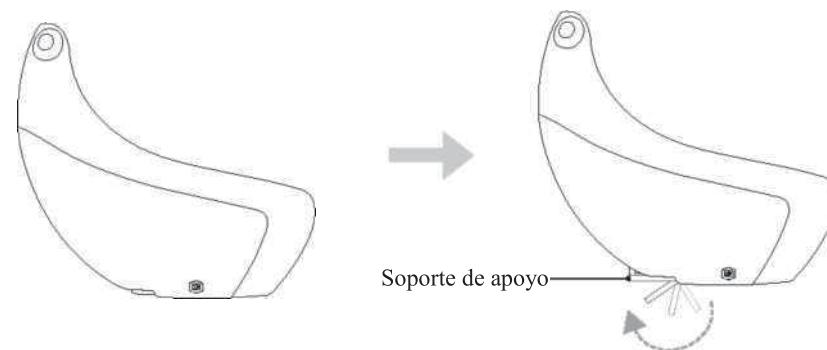

Paso 2: accesorios

- Conecte el cable de corriente al sillón, enchufe la clavija, accione el interruptor de alimentación y encienda el sillón de masaje con el control remoto.

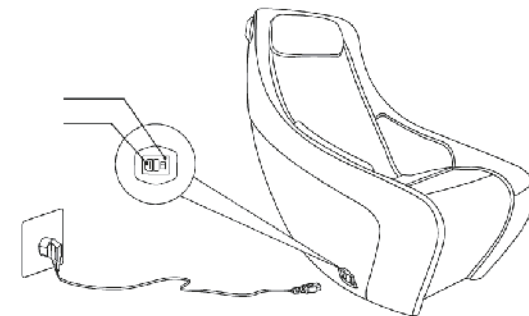

PRECAUCIÓN

- Antes de utilizar el sillón, asegúrese de que el cable esté desenredado.

INSTALACIÓN

Cómo mover el sillón

- Apague el sillón y desconéctelo.



PRECAUCIÓN

- No mueva el sillón cuando haya alguien sentado.
- No tire del reposabrazos para mover el sillón, sujete únicamente la base y el respaldo.

Encienda la alimentación.

- Conecte la clavija en la toma de corriente.
- Accione el interruptor de encendido que se encuentra debajo a la derecha del reposabrazos (al estar sentado en el sillón).





PRECAUCIÓN

- Antes de accionar el interruptor, por favor asegúrese de que el cable de corriente no tenga daños.
- Asegúrese de que el interruptor esté en apagado antes de conectar la clavija a la toma de corriente.

Instrucciones de instalación

Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de mal funcionamiento o avería, la corriente eléctrica sigue la ruta con menor resistencia a tierra para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este producto está equipado con un cable y enchufe de conducción a tierra. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente apropiada, que esté instalada y conectada a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales.

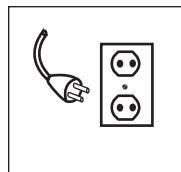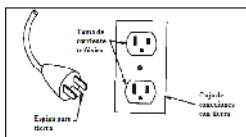

PELIGRO

La conexión inadecuada del equipo a la tierra puede generar riesgo de descarga eléctrica. Consulte a un técnico de servicio o electricista cualificado si no está seguro de que el equipo esté conectado a tierra adecuadamente. No altere la clavija suministrada con el producto: si no entra en la toma de corriente, solicite a un electricista cualificado que instale una toma apropiada.

Este producto está diseñado para utilizarse en circuitos de 120 V nominales y tiene una clavija trifásica como la que se muestra en el dibujo A de la siguiente figura. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que corresponda a la clavija. No se debe utilizar ningún adaptador con este producto.

Toma a tierra

Este sillón de masaje es un aparato eléctrico Nivel Uno: asegúrese de contar con una toma de corriente trifásica para garantizar que el cable a tierra conectado a la toma de corriente se pueda conectar correctamente a tierra para evitar fugas de corriente, descargas eléctricas y otros efectos negativos durante el uso.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

1. Limpieza

- Antes de limpiar el sillón, asegúrese de que la clavija esté desconectada de la toma de corriente. Utilice un trapo humedecido con líquido de limpieza para sacudir el sillón de masaje; a continuación, utilice un trapo seco para pulir el material



PRECAUCIÓN

- No utilice agentes de limpieza corrosivos como el benceno o el disolvente para limpiar el sillón; estos productos pueden hacer que el color del tapiz se desvanezca o que la tela se agriete y desgaste. No planche el tapiz.

2. Mantenimiento

- Asegúrese de que el sillón esté desconectado.
- Sacuda o aspire el polvo. Mantenga el sillón de masaje limpio y alejado de lugares húmedos.



PRECAUCIÓN

- No coloque el producto directamente bajo la luz del sol o en lugares con alta temperatura. Esto puede hacer que el color del tapiz se desvanezca.

3. Limpieza del forro de cuero sintético.

- Utilice un trapo suave y seco para limpiar el producto.
- Cada dos o tres meses, pule el forro con un trapo humedecido con un agente de limpieza y posteriormente frótelo con un trapo seco cuando se haya secado el producto limpiador.


RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No.	Problema	Posible causa	Solución
1	Se escucha un leve sonido de fricción.	Este sonido es normal, lo produce el motor al trabajar cuando la bola de masaje se está frotando contra la cubierta de tela.	Esto es normal y no se requieren reparaciones.
2	El sillón no enciende.	El sillón no está conectado.	Conecte la clavija del sillón.
		El interruptor de alimentación está en posición de apagado.	Accione el interruptor.
		El fusible del sillón de masaje está fundido.	Reemplace el fusible por uno nuevo.

Si persisten los problemas o anomalías después de haber tomado las medidas anteriores, por favor contacte con su distribuidor local para la reparación y mantenimiento. No desarme el producto usted mismo. Nuestra empresa no se hace responsable de los daños al producto o lesiones personales debidas al uso, reparación o mantenimiento inadecuados. Gracias por su colaboración.

Para reemplazar el fusible:

- Asegúrese de que el sillón esté apagado y desconectado.
- Utilice un destornillador plano para extraer el fusible como se muestra en la figura. 1.
- Cambie el fusible fundido y coloque uno nuevo con las mismas especificaciones, como muestra la figura. 2.

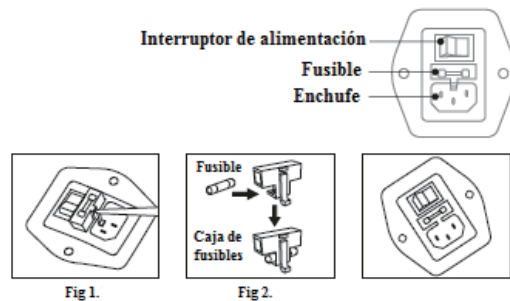

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre: Sillón de Masaje Compacto CirC

Modelo: MR320

Voltaje/tensión nominal: 220-240 V

Frecuencia nominal: 50-60 Hz

Corriente nominal: 0.45 Amp.

*Utilice el sillón solamente con el voltaje indicado.